

BBS

NÁVOD NA POUŽITIE

SK

DETSKÁ ELEKTRONICKÁ VÁHA

04/09/2020

V.1



 **Baxtran**
vlastníctvo ochrannej známky

Pol. Empordà Internacional Calle F. Parcela 15-16
17469 VILAMALLA - (Girona) ESPAÑA
T. (34) 972 527 212 - F. (34) 972 527 211

GIROPES

Výrobca si vyhradzuje právo bez predchádzajúceho upozornenia upravovať vlastnosti svojich výrobkov, zaviesť technické vylepšenia alebo dodržiavať nové úradné predpisy

1. ÚVOD
2. HLAVNÉ ŠPECIFIKÁCIE A VLASTNOSTI
3. INŠTALÁCIA BATÉRIE
4. LCD DISPLEJ
5. FUNKCIE TLAČIDIEL
6. AKO ZMERAŤ VÝŠKU A VÁHU
7. HISTÓRIA
8. AUTOMATICKÉ/ RUČNÉ VYPÍNANIE
9. CHYBOVÉ HLÁSENIA
10. ČISTENIE A STAROSTLIVOSŤ


1. MILÝ PRIATELIA,

Vitajte pri používaní našej detskej váhy, najlepšieho rastúceho spoločníka! Pozorne si prečítajte návod, aby ste zaistili správne použitie.

2. HLAVNÉ ŠPECIFIKÁCIE A VLASTNOSTI


- Maximálna kapacita: 25kg; dielik: 0,005 kg.
- Rozsah merania výšky: 46-80cm, dielik: 1mm
- Pamäť: podporovaných 8 používateľov, 15 uložených záznamov pre každého používateľa. Značka porovnávania údajov v užívateľskom režime.
- číslo 0 je režim host'a. Údaje nebudú zaznamenané.

3. INŠTALÁCIA BATÉRII

Type	Diagram	Installation
4 X 1.5V AAA Batérie (nie su súčasťou)		Vložte batérie správnym smerom, ako je to naznačené v priestore batérii

Poznámka: Použite zodpovedajúce batérie. Vyberte batérie, ak ich nebudete dlhší čas používať (viac ako tri mesiace).

4. LCD DISPLEJ

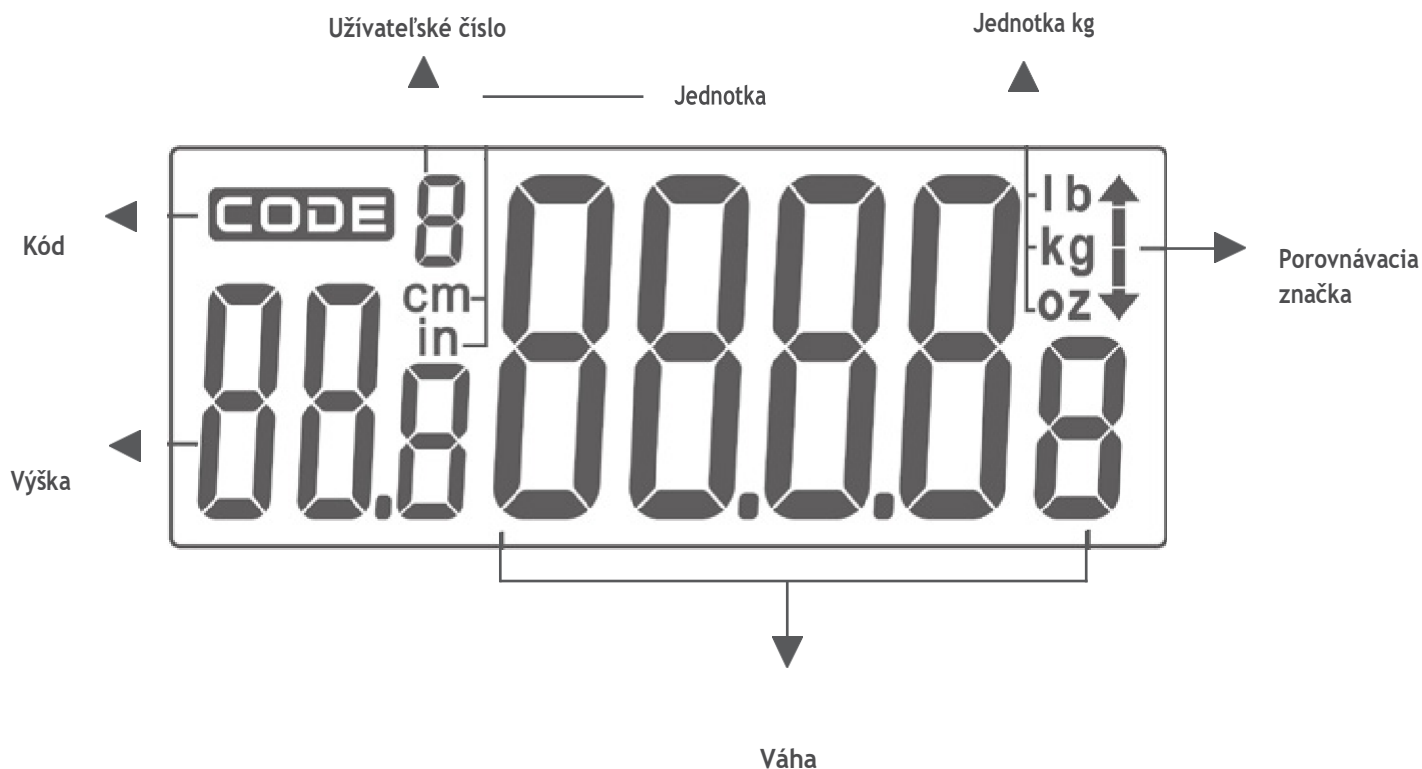

5. FUNKCIE TLAČIDIEL



zapnutie/vypnutie/nulovanie ZERO



krátke stlačenie: podržanie hodnoty na displeji/odloženie merania

dlhé stlačenie: prepínanie jednotiek



Krátke stlačenie:






Vstup do prehľadu histórie. Krátkym stlačením sa pohybujete v histórii

Dlhé stlačenie:

Vstup do výberu používateľa, následne krátkymi stlačeniami si vyberiete číslo užívateľa, pre jeho potvrdenie stlačte tlačidlo dlhým stlačením

6. AKO ZMERAŤ VÝŠKU A VÁHU

Na zabezpečenie presnosti merania používajte váhu na rovnom a pevnom povrchu.

1. Stlačte tlačidlo “” pre zapnutie váhy a vráťte sa na predchádzajúce číslo používateľa. Dlhým stlačením tlačidla “” sa dostanete do ponuky s používateľmi, krátkym stlačením prepínate používateľov. Opätovným dlhým stlačením potvrdíte vybraného používateľa. Používateľské číslo 0 slúži, ako hosťujúci používateľ a teda jeho údaje sa neuložia do pamäte váhy.
2. Vytiahnite silikónovú obrannú zarážku a vložte hornú dosku (pozrite si obrázky 1,2)
3. Zdvihnutím rukoväte nahor do zvislej polohy aktivujete meranie výšky, držte ju úplne naklonenú v počiatočnej polohe. LCD displej zobrazí, ako počiatočnú hodnotu 46cm. Ak nie, stlačením tlačidla  inicializujete hodnotu a potom vyberte meraciu dosku na meranie výšky dieťaťa.
4. Opatrne položte dieťa na váhu. Hlava by sa mala dotýkať dosky nad hlavou, zatiaľ čo nohy by sa mali dotýkať vertikálnej dosky pri nohách.
5. Stlačte tlačidlo “” pre uloženie meraní hmotnosti a výšky. Výsledky dvakrát zablikajú, čo znamená, že sú potvrdené a uložené v pamäti váhy. Porovnanie s predchádzajúcimi údajmi sa bude opakovane zobrazovať ako rozdielová hodnota. V režime host'a sa na porovnanie zobrazia merania, avšak nebudú uložené v pamäti váhy. (Stlačením tlačidla “” zrušíte uzamknutie, alebo ho necháte automaticky vypnúť bez akejkoľvek operácie.)

Poznámka: Opamäti váhy: podporovaných je max. 8 užívateľov s počtom 15 záznamov pre každého používateľa. Následne jeho prečerpání bude najstarší záznam prepísaný najnovším.

Poznámka: Len pre meranie hmotnosti preskočte kroky 2 a 3





Vyberte číslo používateľa



0-host'ujúci používateľ

Aktivujte meranie výšky



položte dieťa na váhu



Stlačte tlačítko HOLD a namerané údaje sa zachovajú na displeji, avšak neuložia sa do pamäte.



Vyberte číslo používateľa



User Mode


Aktivujte meranie výšky



Položte dieťa na váhu



Stlačením sa údaje uložia do pamäte

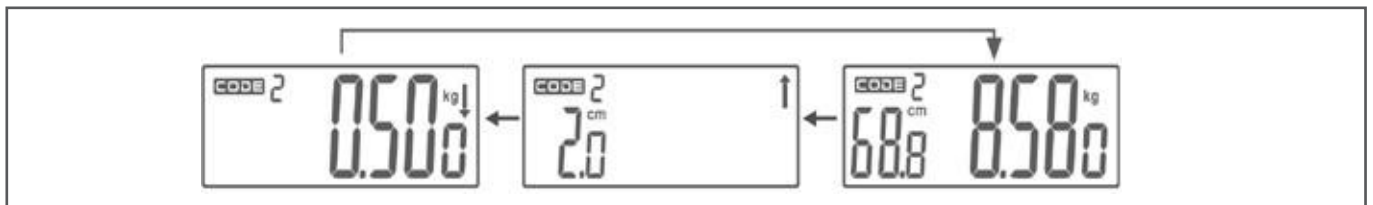


Rozdiel hmotnosti

Výškový rozdiel

Aktuálne merania

7. HISTÓRIA

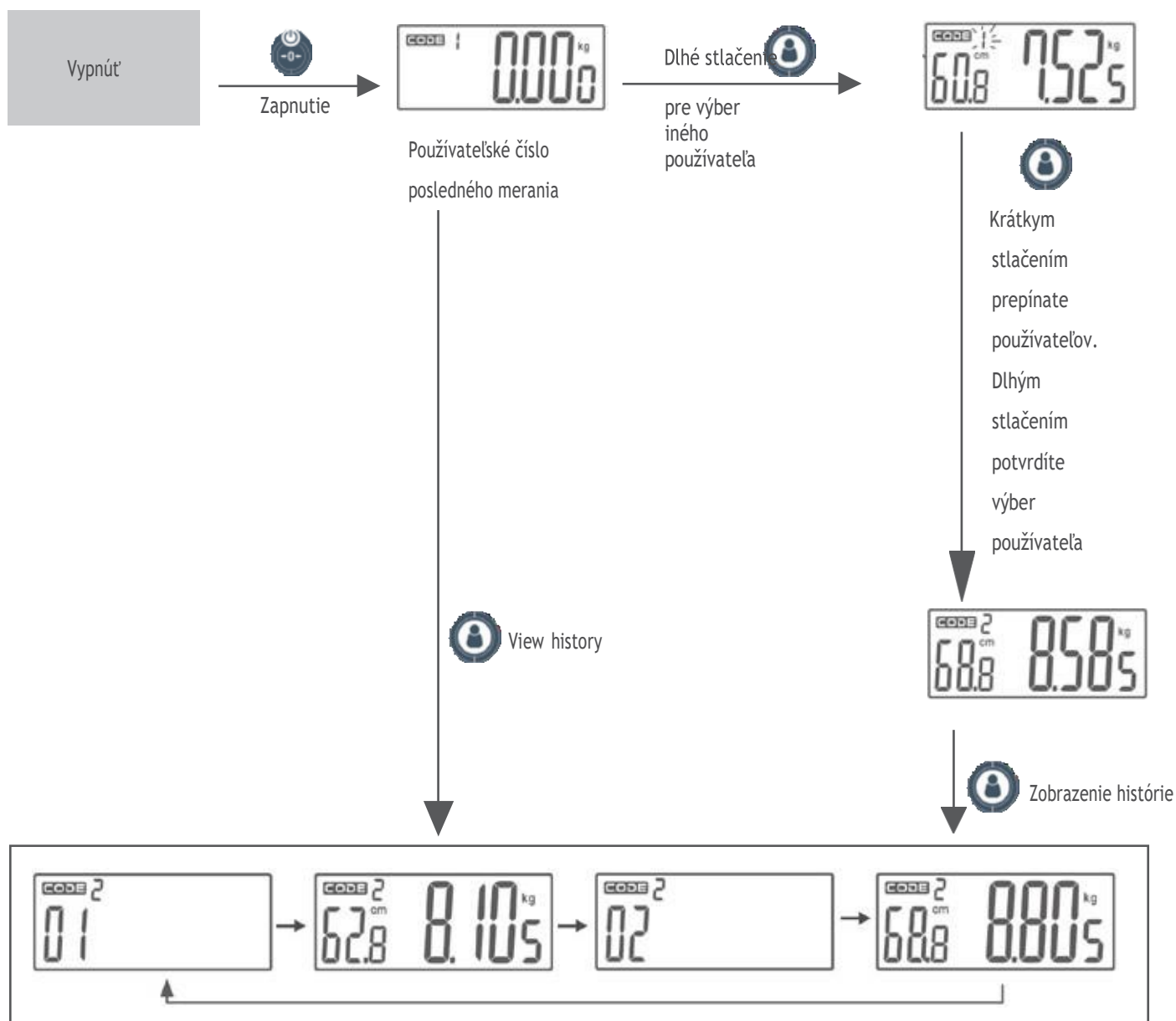

Krátkym stlačením sa opakovane zobrazia existujúce údaje.


Položte dieťa na váhu, alebo stlačte akékoľvek tlačidlo na zapnutie režimu hmotnosti



Poznámka: Dlhým stlačením tlačidla " vyberte používateľa

Položte dieťa na váhu, alebo stlačte ľubovoľné tlačidlo, aby ste zapli režim hmotnosti.

8. AUTOMATICKÉ/RUČNÉ VYPÍNANIE

Pre dlhšiu životnosť batérie sa váha automaticky vypne po približne 1 minúte bez akejkoľvek operácie, alebo ju po použití vypnete dlhým stlačením „“.



9. CHYBOVÉ HLÁSENIA

CHYBOVÉ HLÁSENIA	Názov	Pokyny
Err	PREŤAŽENIE VÁHY	Váha je zaťažená nad max. kapacitu. váhy Pomaly odstráňte teleso
Lo	LOW BATTERY INDICATION	Vymenite prosím batérie

10. ČISTENIE A STAROSTLIVOSŤ

1. Váhu čistite mierne navlhčenou handričkou. Váhu neponárajte do vody ani nepoužívajte chemické čistiace prostriedky.
2. Pri kontakte s tukmi, korením, octom a silne farbiacimi potravinami, alebo kyselinami, citrusovými šťavami je potrebné okamžité vyčistenie všetkých plastových dielov
3. Váhu vždy používajte na pevnom, rovnom povrchu
4. S váhou narábajte opatrne.
5. Tento výrobok je presný nástroj, zaobchádzajte s ním opatrne
6. Váhu umiestnite na chladné suché miesto
7. Ak sa váha nedá zapnúť, skontrolujte batérie
8. Určené pre rodiny a na nekomerčné účely.

11. KALIBRÁCIA VÁHY

1. Váha musí byť vypnutá
2. Súčasne stlačte tlačidlá ON/OFF a tlačidlo  následne tlačidlo  uvoľnite a opäť jedenkrát stlačte
3. Váha sa zapne a na váhe sa zobrazí hodnota prevodníka.
4. Po ustálení váhy sa na váhe vľavo objaví číslo 10, teraz položte na váhu závažie s hmotnosťou 10kg
5. Následne sa na váhe vľavo objaví číslo 20, teraz položte na váhu závažie s hmotnosťou 20kg
6. Kalibrácia je ukončená, ak sa na displeji objaví PASS



marca propiedad de | est une marque de | trade mark propriety of:



Pol. Empordà Internacional Calle F. Parcela 15-16
17469 VILAMALLA - (Girona) ESPAÑA
T. (34) 972 527 212 - F. (34) 972 527 211